

DE ROL VAN DE BANDAGIST

LYMPHCONNECT 2026 | Marthe Cauchie



1. Rondbrei & Vlakbrei
2. Maatname compressiekousen
3. Terugbetaling & hernieuwing
4. Aan- en uittrekken
5. Onderhoud & verzorging
6. Zwachtelsystemen (Self Management System)
7. Compressiebh's & andere
8. Borstprothesen & zwemprothesen

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Rondbrei & Vlakbrei



Zonder naad

Fijne, elastische kous

Verschillende kwaliteiten volgens
problematiek

Confectie of maatwerk

Lichte tot matige problematiek, matig
lymfoedeem



Met naad

Weinig elastische kous

Anatomische vorm

Confectie of maatwerk (meer
mogelijkheden in maatwerk)

Lymfoedeem, lipoedeem, ernstige
flebologische klachten

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Maatname compressiekousen

Best 's morgens en/of na zwachtelen op oedeem-vrij
lidmaat op anatomische punten


Andere manier dan opmeting kinesist

Al zittend of staand

Arm licht gebogen

Vingers licht gespreid

Elke fabrikant heeft een andere manier van meten

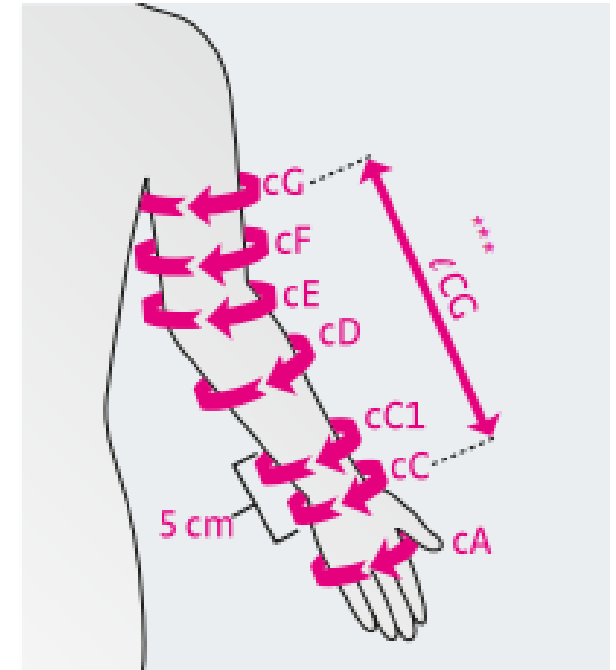

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Terugbetaling vanaf 15mmHg & hernieuwing

Lymfoedeem of vasculaire malformatie

- 2 armkousen en 4 handschoenen per arm per kalenderjaar
- 3 armkousen met handschoen in 1 stuk per arm per kalenderjaar
- 1 armkous en 2 handschoenen + 1 armkous met handschoen in 1 stuk per arm per kalenderjaar

Vanaf 1^e voorschrift: **ALTIJD** geneesheer-specialist

MONITEUR BELGE — 18 04 2025 — Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAAD 44203

Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11^o van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Bijlage 94B

MEDISCH VOORSCHRIFT voor therapeutische elastische armkousen en handschoenen (art. 27/1)

Identificatie van de rechthebbende (of kleiner ziekenfonds)

Naam en voornaam rechthebbende:

Adres:

Inschrijvingsnummer bij de Sociale Zekerheid:

Naam ziekenfonds of nummer:

Ondergetekende arts verklaart dat voldaan is aan de medische indicatie zoals opgenomen in art 27/1, C.3. van de nomenclatuur en dat de staving van deze diagnose wordt bewaard in het medisch dossier van de rechthebbende.

Medische motivatie:

☐ Indicaties voor therapeutische elastische armkousen en handschoenen, namelijk:

- lymfoedeem van het bovenste lidmaat, verworven of bij de geboorte aanwezig
- vasculaire malformatie van het bovenste lidmaat, bij de geboorte aanwezig

Lokalisatie en noodzakelijke kwikdruk:

Armkousen en handschoenen	Links (aantal stuks)	Kwikdruk (mm Hg) ⁹	Rechts (aantal stuks)	Kwikdruk (mm Hg) ¹⁰
☐ Armkous zonder handschoen				
☐ Armkous met handschoen zonder vingers/vingeraanzetten in één stuk				
☐ Armkous met handschoen met vingers/vingeraanzetten in één stuk				
☐ Handschoen zonder vingers/vingeraanzetten				
☐ Handschoen met vingers/vingeraanzetten				

Eventuele opmerkingen:

.....

Identificatie voorschrijvend arts¹¹

Naam en voornaam:

RIZIV-identificatienummer:

Datum: van tot

Handtekening voorschrijvend arts:

9 Minstens 12 mm Hg
10 Minstens 15 mm Hg
11 De therapeutische elastische armkousen en handschoenen moeten steeds worden voorgeschreven door een arts waarvan spreekt in C.4., van artikel 27/1 van de nomenclatuur

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Terugbetaling & hernieuwing

Prijs van kous afhankelijk van soort kous

- Rondbrei ≠ vlakbrei
- Terugbetaling afhankelijk van model van armkous en handschoen (met of zonder vingers)
- Opties op vlakbreikous
 - Comfortzone elleboog, elleboog meer geplooid, extra schuine afwerking, extra nopjes, lymfepad, zacht stofje aan duim,...

Levensduur compressiekousen

- Minimum 6 maanden, maximum 1 jaar
- Op elke compressiekous staat er een vervaldatum
- Aan te raden om alle verstrekkingen aan te vragen bij bandagist

Indien problemen met de armkousen en/of handschoenen, direct contact opnemen met bandagist

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Mogelijkheden in maatwerk

ELLEBOOG

- Comfortzone
- Elleboog meer geplooid
- Voeringstof in elleboogplooi



SCHOUDER

- Schouderkap met riem
- Verschillende siliconenboorden
- Extra schuine afwerking



ARMKOUSEN & HANDSCHOENEN


Mogelijkheden in maatwerk

LYMFEPADS

- Geribd, fijne noppen of grove noppen
- Met zakje of los
- Handrug
- Mogelijk in handschoen en/of armkous

VOERINGSTOF

- Elleboogplooi
- Tussen wijsvinger en duim

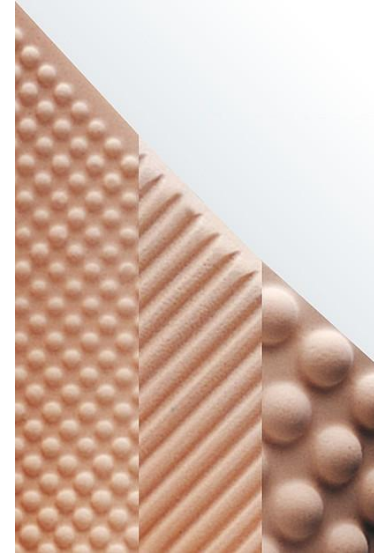

ARMKOUSEN & HANDSCHOENEN

Aan- en uittrekken



AANTREKHULPEN

- Arion Easy-Slide Arm
- Arion Dactyna (handschoen met vingers)
- Medi Arm Butler
- Aantrekhandschoenen (meer grip)



NIET terugbetaald

ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Onderhoud & verzorging

DAGELIJKS WASSEN

- Dagelijks juiste compressie op lidmaat
- Ontvetten kous en siliconenboord
- Onderhoud elastiek
- Maximum 40°
- Wasmachine of handwas
- **GEEN** wasverzachter
- Vloeibaar wasproduct
- In wasnetje voor bescherming kous
- Droogkast programma fijne was/wol

VERZORGING HUID

- Lidmaat 's avonds inwrijven
- Niet rechtstreeks onder kous
 - Behalve Cutimed (5% of 10%) of gel/crème specifiek van leverancier kousen

EXTRA'S

- Huidlijm (verschillende leveranciers)
- Verfrissende spray om over kous aan te brengen
- Specifiek wasmiddel leverancier/merk kousen



ARMKOUSSEN & HANDSCHOENEN

Zwachtelsystemen (Self Management System)



- Zelf druk regelen op lidmaat
- Verschillende onderdelen apart
 - Arm en hand samen of apart
- Verschillende leveranciers

NIET terugbetaald

COMPRESSIEBH'S & ANDERE



COMPRESSIEBH'S

- Verschillende drukregio's
- Mogelijkheid om borstprothese in zakje te steken
- Verschillende leveranciers
- Ongeveer €90



NIET terugbetaald



MASSAGE ARMKOUS

- Ontlastende lichte armkous met massagenopjes

NIET terugbetaald



COMFIWAVE

- Nachtcompressie
- Massage-effect

NIET terugbetaald

BORSTPROTHESEN & ZWEMPROTHESEN

Post-operatieve, eerste en definitieve borstprothese, deelprothesen & shapers



POST-OPERATIEVE PROTHESE

- Na de operatie gedurende 6 weken
- Zachte, lichte eerste prothesen gevuld met watten
- Kan aangepast worden naar gelang de zwelling
- Zorgt voor lichaamssymmetrie
- Te dragen in de (prothese-) bh/postoperatieve bh



EERSTE/DEFINITIEVE PROTHESE

- Siliconen prothese (symmetrisch of asymmetrisch)
- Gewicht van een natuurlijke borst
- Kleefprothese of prothese in bh
- Grootte en vorm afhankelijk van niet aangedane borst
- Eerste prothese na 6 weken na operatie
- Definitieve prothese na 1 jaar na eerste prothese, nadien om de 2 jaar



DEELPROTHESEN & SHAPERS

- Visuele symmetrie
- Na borstsparende operatie
- Kleefprothese of deelprothese/shaper in bh
- Verschillende diktes, vormen en groottes
- Eerste prothese na 6 weken na operatie
- Definitieve prothese na 1 jaar na eerste prothese, nadien om de 2 jaar

BORSTPROTHESEN & ZWEMPROTHESEN

Zwemprothese

ZWEMPROTHESE

- Volledige – of deelzwemprothese
- Enkel symmetrische vorm
- Holle zijde met golvende vorm tegen lichaam voor doorstroming water en lucht



NIET terugbetaald

Bedankt voor jullie aandacht

marthe.cauchie@vigogroup.eu

alexandra.ballegeer@vigogroup.eu

axelle.vandeputte@vigogroup.eu

winkel.gent@vigogroup.eu

09/222.70.66